



可杀芽孢的泡沫型消毒剂


Jet®泡沫型表面消毒液是一款强有力的杀芽孢消毒剂，可用于患者周围的医疗设备表面。

Jet®泡沫型表面消毒液也是一款强有力的清洁剂，可在数秒内破坏微生物RNA及DNA*。其清洗效果达到医疗器械清洗液的要求，可有效降低蛋白质和碳水化合物的含量。

在感染风险最高的区域，Jet®泡沫型表面消毒液亦能为患者及医护人员提供最佳的安全保护。产品适用于病房、隔离病房、手术室、重症监护病房、肿瘤病房和新生儿病房等区域。



每瓶可挤
570次

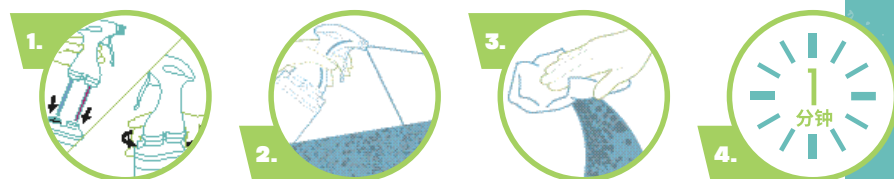

本品可杀灭芽孢、分枝杆菌、病毒、真菌和细菌。

通过中国CMA检测:

- 枯草杆菌黑色变种
- 龟分枝杆菌
- 脊髓灰质炎病毒
- 黑曲霉
- 白色念珠菌
- 金黄色葡萄球菌
- 铜绿假单胞菌
- 大肠杆菌
- 耐万古霉素肠球菌
- 屎肠球菌
- 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌

按照欧盟消毒剂上市要求试验:

- 艰难梭菌
- 结核分枝杆菌
- 诺如病毒
- 冠状病毒**
- 甲型流感病毒 (H1N1)
- 乙肝病毒 (HBV)
- 人类免疫缺陷病毒 (HIV)
- 大肠杆菌
- 耐碳青霉烯类肠杆菌 (CRE)
- 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌
- 耐万古霉素肠球菌 (VRE) 屎肠球菌
- 白色念珠菌

完全遵从《消毒技术规范》(卫生部2002年版)及 EN 14885以及欧洲的医疗领域对消毒剂的最新法规要求:

微生物种类	《消毒技术规范》	EN 14885以及最新法规要求
细菌芽孢	2.1.1.7.4	EN 17126, EN 13704
分枝杆菌	2.1.1.8.6	EN 14348, EN 14563
病毒	2.1.1.10.7	EN 14476, EN 16615
酵母菌/真菌	2.1.1.9.3	EN 13624, EN 14562, EN 16615
细菌	2.1.1.7.4	EN 13727, EN 14561, EN 16615

表现力优于
一般表面消毒湿巾
可杀灭细菌芽孢、
分枝杆菌、
致病性真菌、
细菌及灭活病毒

随用随取、从容应对
无需制备、
量取或稀释

比使用表面消毒湿巾便宜
单片使用成本仅为0.5元

比一般消毒湿巾
产生更少的垃圾

高效来源 二氧化氯泡沫

Jet®泡沫型表面消毒液与雀艾斯达其它消毒产品一样，核心是二氧化氯技术。Jet®泡沫型表面消毒液特别适用于清洁和破坏生物膜的表面消毒场景。

二氧化氯是一种广泛被认可的去除生物膜及预防生物膜形成的最有效消毒剂之一。

由于Jet®泡沫型表面消毒液呈泡沫状。在使用时，无气雾产生。

节省空间 减少浪费




3.5公斤



0.8公斤

EN 16615标准中标准擦拭效果意味着Jet®泡沫型表面消毒液可以和任何非一次性使用的擦拭巾配套使用，从而减少塑料擦拭纸的使用和浪费。

Jet®泡沫型表面消毒液 为病患提供全方位的保护

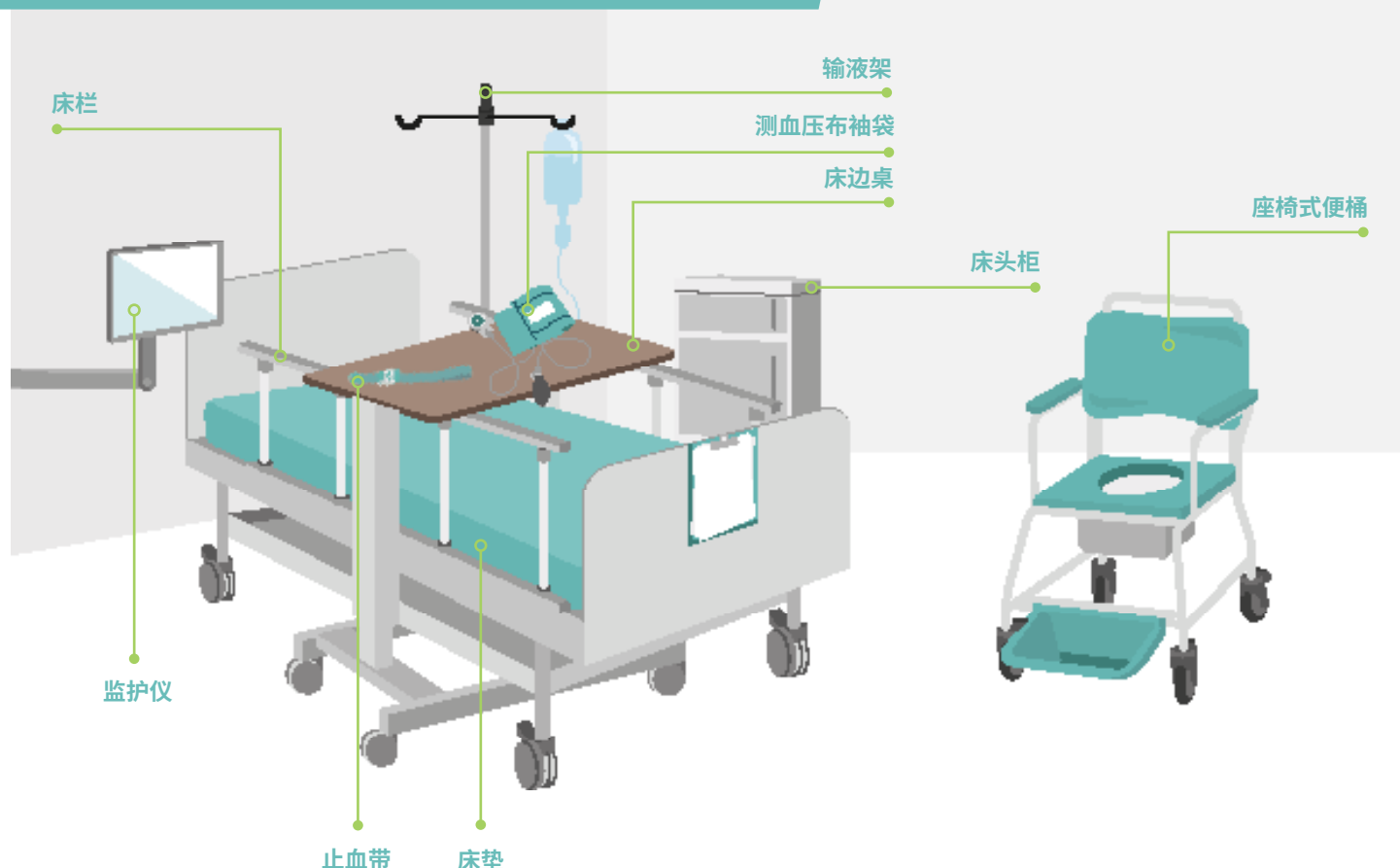

注：产品的注意事项请参考产品说明书。

现已开放订购！



每箱含1个喷头及
4瓶800mL Jet®泡沫型表面消毒液
产品编号: CCH010403

Jet®泡沫型表面消毒液已通过国家卫生健康委卫生监督中心审核，备案为第二类消毒产品。

Jet®泡沫型表面消毒液在欧盟被列为IIa级医疗器械（根据CE标准93/42/EEC及2007/47/EC修订案）。

cache™

在华责任单位：雀艾斯达医疗器械（上海）有限公司 - 上海市黄浦区淡水路277号二层203室
电话 +86 (21) 8016 2555 - 邮箱 888@tristel.com
制造商: Tristel Solutions Limited - T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Copyright © Tristel Solutions - Mkt-Bro-1090-4 - February 2021 - 如需更多Tristel专利信息，请访问: <http://www.our-patents.info/tristel>
*Pacific Biolabs (2017) Analysis of Tristel Nucleic Acid degradation properties. **根据EN 14476验证的病毒灭活效果。

关注微信公众号
获取更多信息
并可更新培训证书

